



Операционные столы Фаура

КАТАЛОГ



Электрогидравлические операционные столы Фаура

Модели: 4ЭГ-4, 5ЭГ-4, 5ЭГ-5



- Управление центральным тормозом с помощью дистанционного пульта управления.
- Встроенный датчик положения панели стола относительно горизонта.
- Конструкция рамы стола, кошука опорной колоны и основания выполнены из нержавеющей стали.
- Полностью рентгенопрозрачная поверхность стола.
- Матрас стола изготовлен из антистатических

материалов последнего поколения по технологии "memory foam".

- Встроенный излом спинной секции или почечный валик.
- Встроенный аккумулятор для автономной работы.
- Рельсы для крепления аксессуаров, вдоль секций всего стола.
- Функция продольного сдвига поверхности стола (слайдинг).

Электромеханические операционные столы Фаура

Модель: 5ЭМ-4




- Управление столом осуществляется при помощи дистанционного пульта управления.
- Основание и станина стола выполнены из нержавеющей стали
- Регулировка наклонов ножных секций осуществляется при помощи пневмопружин.
- Функция продольного сдвига поверхности стола для осуществления рентгенографии.

- Операционный стол имеет встроенный аккумулятор.
- Рельсы для крепления аксессуаров.
- Встроенный почечный валик.
- Матрас стола изготовлен из антистатических материалов последнего поколения по технологии "memory foam".

Механогидравлические операционные столы Фаура

Модель: 6ЭМ-4

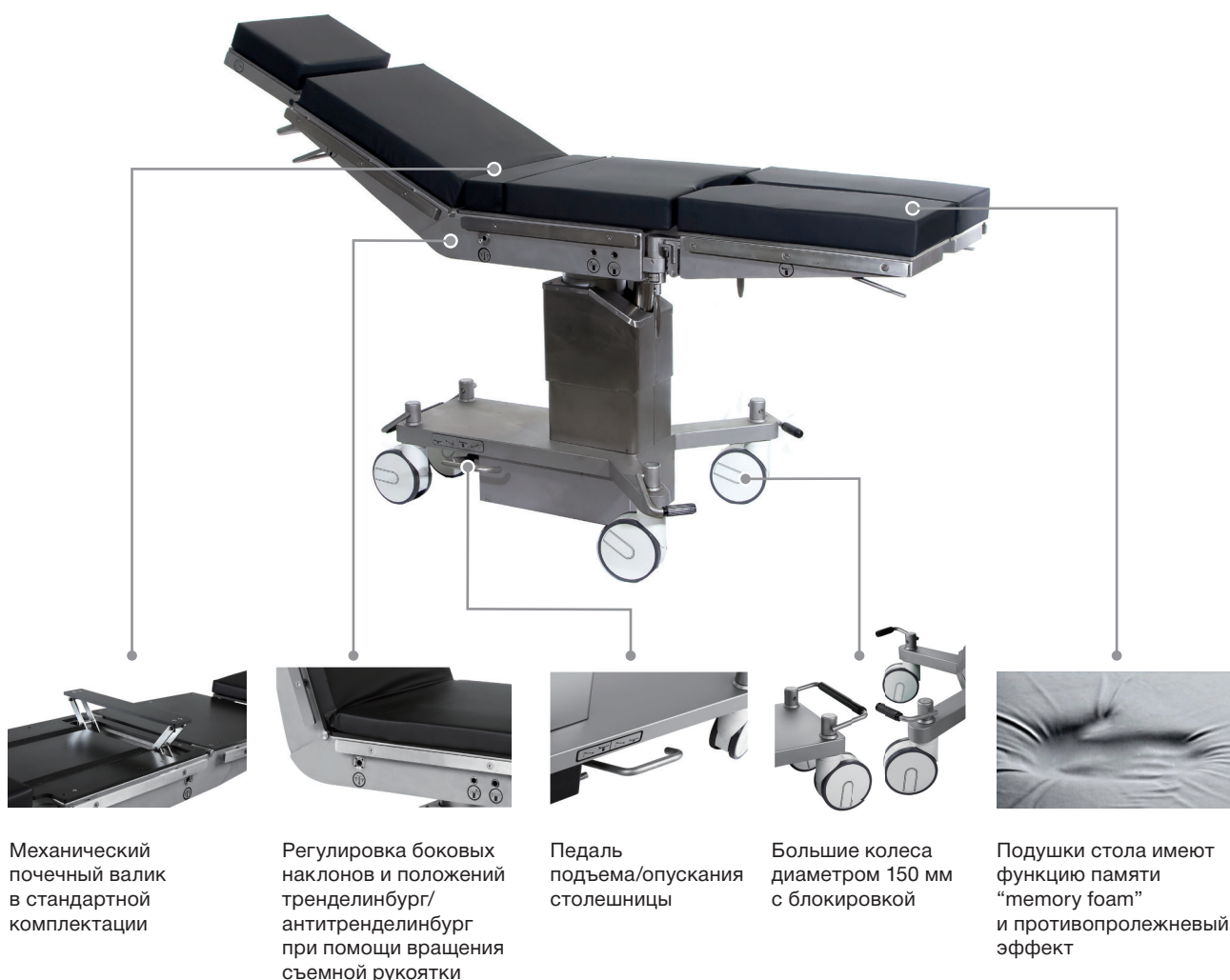


- Надежный и простой механизм управления.
- Регулировка наклонов головной секции механическая.
- Поверхность стола полностью рентгенопрозрачна.
- Управление механогидравлическим приводом подъема/опускания столешницы осуществля-

- ется при помощи нажатия на педаль.
- Матрас стола изготовлен из антистатических материалов последнего поколения по технологии "memory foam".
- Рельсы для крепления аксессуаров.
- Наклон ножных секций в вертикальной плоскости выполняется при помощи пневмопружин.

Механогидравлические операционные столы Фаура

Модель: 6ЭГ-4

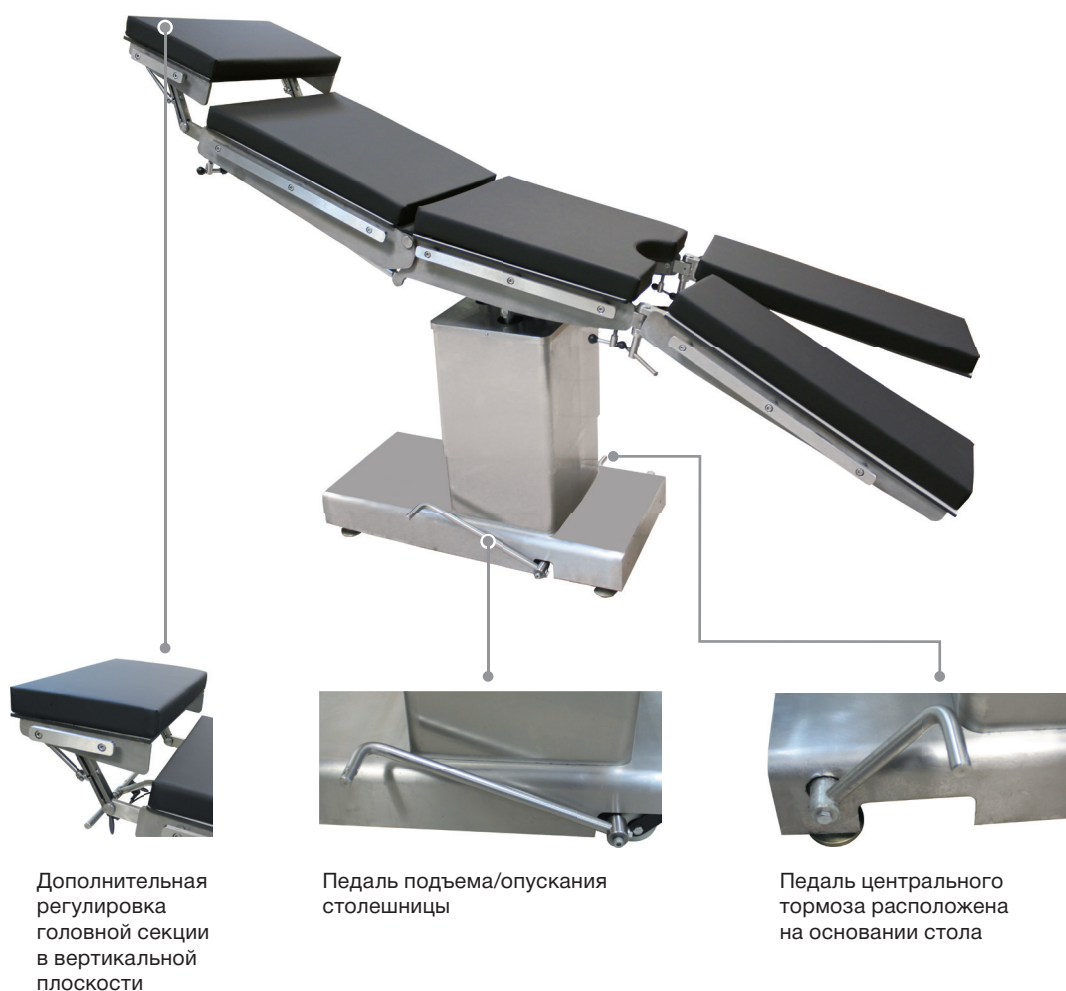







- Надежный и простой механизм управления.
- Механогидравлическое управление подъемом/опусканием столешницы происходит при помощи нажатия на педаль.
- Ножные и головная секции регулируются рычагами, при минимальном применении силы.

- Поверхность стола полностью рентгенопрозрачна.
- Все открытые металлические поверхности выполнены из нержавеющей стали.
- Рельсы для крепления аксессуаров.
- Механический центральный тормоз.

Технические характеристики



Крайнее нижнее положение поверхности стола	600-700 мм
Крайнее верхнее положение поверхности стола	850-1050 мм
Длина панели стола	2050±50 мм
Наклон панели стола по Тренделинбургу/Анти-Тренделинбургу	до 30/30 градусов
Боковые наклоны панели стола (влево/вправо)	до 20/20 градусов
Ширина панели стола	до 530±20 мм
Наклоны спинной секции (вверх/вниз)	до 85/50 градусов
Наклоны ножных секций (вверх/вниз)	до 30/90 градусов
Наклоны головной секции (вверх/вниз)	до 60/90 градусов
Встроенные аккумуляторные батареи для столов с электроприводом	включено
Грузоподъемность стола	до 250 кг

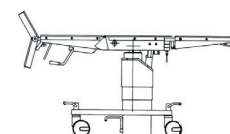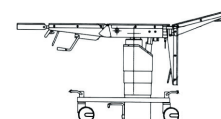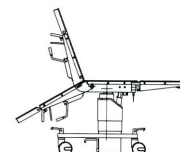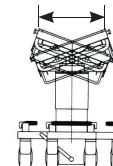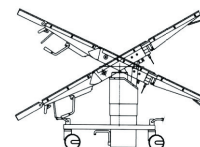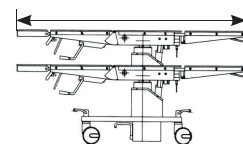

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики

Набор стандартных принадлежностей



Подставка под руку с ремнем для фиксации



Ремень для фиксации тела



Анестезиологический экран



Подставка под ногу (по Гепелю)

Набор дополнительных принадлежностей



Стойка для инфузии




Дополнительная секция, регулируемая по высоте для проведения операций на руке



Подставка под инструменты



Контейнер для отходов

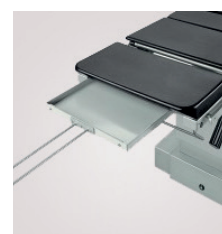

Кассетодержатель



Набор для нейрохирургии (поддержка головы)



Ортопедическая приставка на собственной подставке



Подставка под колени (для проктологии)




Боковые упоры



Плечевые упоры



Вспомогательная поверхность для операций на руке

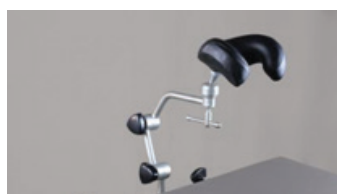

Нейрохирургическая приставка, с дополнительной мягкой подушкой



Нейрохирургическая приставка



Ортопедическая приставка

Информацию можно уточнить у нас в офисе
в г. Москве или у представителей в Вашем
регионе по телефонам, указанным на сайте
www.mediko.ru

ООО ТПК «Медико»:

г. Москва,
тел.: +7 (495) 118-20-48
e-mail: info@mediko.ru
www.mediko.ru